


Instrucciones para la prueba de sangre en el excremento

Si tiene alguna pregunta, porfavor llame al
281-357-0747

IMPORTANTE

- Recolectará muestras de excremento en tres días distintos.
- No tome Ibuprofen, Naproxen or Aspirina siete (7) días antes del examen. Puede tomar Tylenol. Evite altas dosis de Vitamina C, 250mg es suficiente.
- No coma carnes rojas (res, hígado u ovejuna) tres (3) días antes del examen.

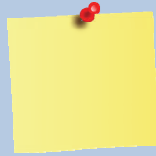

Antes de comenzar la prueba

- Saque una tarjeta de colección del sobre de papel.
- Escriba su nombre, fecha de cumpleaños y fecha de colección sobre la parte frontal de cada tarjeta.



NO HAGA LA PRUEBA

- Tres días antes, durante o después de su período menstrual.
- Si tiene hemorroides sangrantes, sangre en la orina, heridas abiertas en las manos o



Día 1: Hacer la prueba

- **Tomará dos porciones pequeñas del mismo excremento.**
- **No use para la prueba el excremento que ha caído a la taza de baño.**
- Si tiene guantes disponibles, úselos para hacer esta prueba.

1. ORINE ANTES DE LA EVACUACION INTESTINAL.


2. RECOLECTE EL EXCREMENTO EN UN ENVASE LIMPIO Y SECO TAL COMO::

- Plato de papel
- Caja de cartón pequeña
- Cubo recubierto con una bolsa plástica



3. ABRA LA TARJETA DE COLECCION

- Utilice una de las varillas para tomar una muestra **muy pequeña de excremento.**
- Aplique una **capa muy delgada** de excremento en la mitad superior de la ventana.
- Use el otro extremo de la misma varilla para tomar una segunda muestra de una sección diferente del excremento.
- Aplique una **capa muy delgada** de excremento en la mitad inferior de la ventana
- Cierre la tapa.

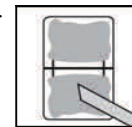

¡Ha terminado con la primera muestra!

Manejo de la muestra

- Tire la varilla en el basurero y el resto del excremento en la taza del baño.
- Deje secar la muestra al aire hasta el día siguiente a la temperatura ambiente (por ejemplo, dentro de un gabinete). No es necesario refrigerar.

Días 2 y 3: Finalización de la prueba

- **Utilice las otras dos tarjetas de colección para tomar muestras dos días más.**
- Repita los pasos 1 a 3 del día 1
- Deje secar cada tarjeta de colección con la muestra hasta el día siguiente.



Después de la prueba

- Coloque las tres tarjetas de colección en la bolsa de muestras.
- Lleve las tarjetas a la clínica.



¡Ha completado la prueba!

Proyecto financiado por el Cancer Prevention and Research Institute of Texas (CPRIT Award PP140028)